

## Стартовые (комбинированные) наборы

Включают в себя все необходимое для выполнения реставраций: 18 штифтов (3 типоразмера, по 6 шт. каждого) и соответствующий набор разветок (и фрез, для модели E). Упаковка - пластиковый бокс.



## Дополнительные наборы

Содержат 6 штифтов одного типоразмера. Рекомендуются в покупке, если у Вас уже имеется комплект инструментов (например, из ранее приобретенного стартового набора). Упаковка - полиэтиленовый пакет.



## Как сделать заказ?

Выберите необходимый Вам типоразмер штифта и упаковку, после чего назовите каталожный номер набора согласно приведенной таблице.

Типоразмер штифта	Каталожный номер для заказа	
	Пакет, 6 шт.	Стартовый набор бокс, 3x6 шт. + инструмент
A01	IKS-A01-V	IKS-Z10-F
A02	IKS-A02-V	
A03	IKS-A03-V	
A04	IKS-A04-V	IKS-Z20-F
B01	IKS-B01-V	
B02	IKS-B02-V	
B03	IKS-B03-V	IKS-Z30-F
E01	IKS-E01-V	
E02	IKS-E02-V	
E03	IKS-E03-V	

## Где купить стекловолоконные штифты «IKADENT»?

<b>РОССИЯ</b>	<b>ИП Ризаев</b> (3412) 40-00-56	<b>Липецк</b> <b>Сервис 32</b> (4742) 38-45-60	<b>Пенза</b> <b>Альба-Дент</b> (8412) 56-23-52	<b>Сыктывкар</b> <b>ВелесМед</b> (8332) 34-11-10
<b>Абакан</b> Медиа (3902) 28-71-41	<b>Медицина</b> (3412) 93-01-51	<b>Махачкала</b> <b>ИП Хартумова Р.М.</b> (928) 962-03-44	<b>Пермь</b> <b>Индент</b> (342) 210-93-33	<b>Тамбов</b> <b>Надежда-Фарм</b> (4752) 52-63-16
<b>Анапа</b> Медтехника (86133) 3-15-10	<b>Уральская</b> медицинская компания (3412) 72-30-16	<b>МедТорг</b> (988) 444-222-8	<b>Петрозаводск</b> <b>МедСтомТорг</b> (8142) 57-74-34	<b>Тверь</b> <b>Алекс</b> (4822) 42-17-23
<b>Архангельск</b> <b>Инемед</b> (8182) 63-31-52	<b>Эстетика</b> (3412) 73-54-73	<b>Москва</b> <b>Alfordent.ru</b> (495) 740-78-85	<b>Камчатский</b> <b>ИП Корж</b> (4152) 23-63-80	<b>Медтехника</b> (4822) 58-88-38
<b>ДТЦ Корал</b> (812) 327-21-77	<b>Иркутск</b> <b>Блик-Трейд</b> (3952) 33-45-00	<b>Альдера</b> (495) 745-52-53	<b>Ростов-на-Дону</b> <b>Олимп</b> (863) 231-84-01	<b>Тольятти</b> <b>ЛогистикаДент</b> (8482) 95-45-88
<b>Астрахань</b> (8512) 52-54-10	<b>Кутум</b> (3952) 22-25-09	<b>Антика</b> (495) 438-57-25	<b>ЮгДенталСервис</b> (863) 263-58-44	<b>Томск</b> <b>Сиб-Мед</b> (3842) 39-60-14
<b>Барнаул</b> <b>Парацельс</b> (3852) 62-63-50	<b>МЕД-Веди</b> (3952) 20-87-64	<b>Арника</b> (495) 938-70-73	<b>ЮмС</b> (863) 247-13-19	<b>Тула</b> <b>Денталь-Т</b> (4872) 58-58-15
<b>Братск</b> <b>Братская</b> Медицинская Компания (3953) 46-47-71	<b>Йошкар-Ола</b> <b>Евромед</b> (8362) 41-05-60	<b>Викадент</b> (916) 148-23-44	<b>Рязань</b> <b>Инемед ЗАО</b> (4912) 76-12-54	<b>Тюмень</b> <b>БАС-Дент</b> (922) 046-90-20
<b>Владивосток</b> <b>Дентал-Экспресс</b> (4232) 44-73-78	<b>Казань</b> <b>Навиг-Х</b> (843) 520-77-46	<b>ДЕГА-Дент</b> (495) 661-36-16	<b>Саранск</b> <b>СтомДент</b> (8342) 48-16-46	<b>Ульяновск</b> <b>МедТорг</b> (8422) 79-42-14
<b>Владикавказ</b> <b>Интерком</b> (8672) 28-07-21	<b>Рокада Дент</b> (843) 294 59 70	<b>Дентомир</b> (495) 618-72-70	<b>Самара</b> <b>Инверсия</b> (846) 373-80-00	<b>Уфа</b> <b>Аналитика</b> (347) 260-70-25
<b>Владимир</b> <b>ИП Бурлаков Н.В.</b> (4922) 43-00-22	<b>Калининград</b> <b>Авермед</b> (4012) 99-12-07	<b>Лас Дентос</b> (495) 971-48-04	<b>Санкт-Петербург</b> <b>ДТЦ Корал</b> (812) 712-43-04	<b>Челябинск</b> <b>Матнес</b> (952) 50-75-422
<b>Волгоград</b> <b>Дентал</b> (8442) 23-88-99	<b>ОБИ</b> (4012) 35-28-13	<b>Макс-Фарма</b> (495) 628-22-88	<b>Прометей</b> (812) 605-00-07	<b>Якутск</b> <b>Руно-Мед</b> (4112) 36-38-34
<b>Вологда</b> <b>ИП Сивков</b> (8172) 73-25-80	<b>Калуга</b> <b>ИП Боев</b> (4842) 53-47-76	<b>Новый Колумб</b> (495) 964-89-00	<b>Каролина</b> (812) 702-81-12	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Воркута</b> <b>Велес Мед</b> (8332) 34-11-10	<b>Канск</b> <b>Медиа</b> (39161) 2-39-73	<b>Расмил-1</b> (495) 951-75-77	<b>Саратов</b> <b>Зубная академия</b> (8452) 20-60-00	<b>Ярославская</b> медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Воронеж</b> <b>Альфа Система</b> (4732) 24-68-88	<b>Кемь</b> <b>Медгрупп Кемь</b> (921) 223-54-73	<b>Татри</b> (499) 738-85-46	<b>Севастополь</b> <b>КрымДент</b> (978) 100-47-24	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Медикасервис</b> (4732) 53-24-66	<b>Киров</b> <b>ВелесМед</b> (8332) 34-11-10	<b>Фармапост</b> (495) 223-23-42	<b>Серпухов</b> <b>ИП Волохов</b> (906) 642-51-60	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>МедТорг</b> (4732) 78-24-14	<b>Комсомольск-на-Амуре</b> <b>ДАН</b> (4217) 24-41-01	<b>Экодент</b> (499) 518-05-20	<b>Смоленск</b> <b>Дента</b> (4812) 64-96-66	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Грозный</b> <b>Дентал Хаус</b> (962) 655-41-41	<b>Красноярск</b> <b>Медиа</b> (391) 213-33-87	<b>Эль-Дент</b> (495) 789-67-39	<b>Стоматорг Плюс</b> (4812) 68-39-25	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Екатеринбург</b> <b>Аверон</b> (343) 236-64-60	<b>Краснодар</b> <b>Арабеск</b> (861) 274 74 04	<b>Мурманск</b> <b>ДТЦ Корал</b> (812) 712-43-04	<b>Сочи</b> <b>Империал-Дент</b> (862) 227-09-90	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Мегадента</b> (343) 388-09-09	<b>Красноярск</b> <b>Медиа</b> (391) 213-33-87	<b>Нальчик</b> <b>Магеллан-Бост</b> (8662) 72-31-18	<b>Стомат</b> (8622) 90-15-71	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Жуковский</b> <b>АтриКом</b> (916) 744-99-25	<b>Крымск</b> <b>Дентал Сити</b> (86131) 2-18-17	<b>Невинномысск</b> <b>ИП Емельяненко В.И.</b> (86554) 6-24-65	<b>Ставрополь</b> <b>Медицина</b> <b>Ставрополь +</b> (8652) 55-08-63	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Иваново</b> <b>Медицинская</b> компания (4932) 32-88-62	<b>Курган</b> <b>ИП Смолякова</b> (3522) 46-64-07	<b>Нижний</b> <b>Новгород</b> <b>Дентал Медиа</b> (831) 412-91-47	<b>Стамат</b> (8622) 90-15-71	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Ижевск</b> <b>Дэс</b> (3412) 90-23-00	<b>Курск</b> <b>ДенталКом</b> (4712) 56-35-65	<b>Новотроицк</b> <b>Витамин</b> (3537) 67-25-12	<b>Стерлитамак</b> <b>Стоматорг+</b> (917) 36-12-777	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92
<b>Ижкомдент</b> (3412) 51-05-34	<b>Кызыл</b> <b>Медиа</b> (391) 213-33-87	<b>Обнинск</b> <b>ИП Волохов</b> (906) 642-51-60	<b>Стерлитамак</b> <b>Стоматорг+</b> (917) 36-12-777	<b>Ярославль</b> Ярославская медицинская компания (4852) 33-06-92


Производитель: ООО "Икадент". Тел. (499) 929-0886

[WWW.IKADENT.RU](http://WWW.IKADENT.RU)

**Желаем здоровья Вам и Вашим пациентам!**


Ваш дилер

# СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ШТИФТЫ

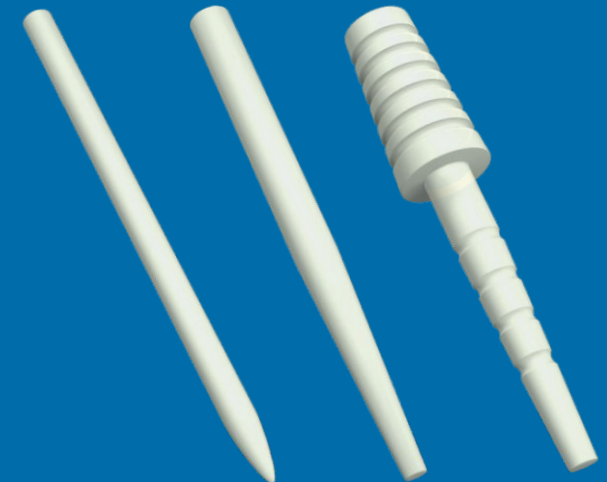

**Компания «IKADENT» рада представить Вашему вниманию новый высококачественный продукт - стекловолоконные штифты.**

Изделия разработаны и производятся в соответствии с последними тенденциями стоматологической индустрии и традиционными стандартами качества «IKADENT». Штифты сочетают проверенные временем конструктивные особенности титановых штифтов и преимущества нового материала - стекловолокна.

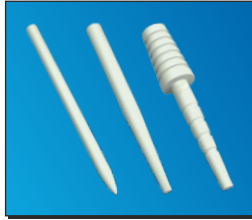

Мы предлагаем не только штифты распространенных цилиндрических и цилиндро-конических форм, но и уникальные модели анкерных стекловолоконных штифтов, имеющих, подобно титановым штифтам «IKADENT», развитую коронковую часть и плечо, что позволяет выполнять объемные эстетические реставрации прямым методом.

Использование штифтов «IKADENT» снижает временные затраты врача и пациента, во многих случаях позволяя осуществить лечение за одно посещение. Штифты «IKADENT» значительно привлекательнее по цене, по сравнению с сопоставимыми по качеству зарубежными аналогами, что позволяет снизить стоимость реставрации для пациента. Модельный ряд позволяет подобрать нужный размер и форму штифта практически для любого клинического случая.

**Особенности штифтов «IKADENT»:**


- ✓ Материал штифтов светопрозрачен, а цветовой тон близок к эмали и натуральному дентину. Поэтому штифты удобно использовать для эстетической реставрации, не прибегая к дополнительным мерам по маскировке.
- ✓ Штифты обладают высокой прочностью, сопоставимой с титаном (от 800 МПа).
- ✓ Модуль упругости штифтов (35 GPa) сопоставим с натуральным дентином (18 GPa). Поэтому штифты образуют гомогенную структуру с твердыми тканями и композитным цементом, а жевательные нагрузки равномерно распределяются по всему корню, повышая долговечность реставрации.
- ✓ Штифты пассивные, при установке и использовании не травмируют дентин и не создают статических напряжений в корне.
- ✓ Поверхность штифтов не подвергается дополнительной химической обработке на производстве и не требует специальных «фирменных» материалов. Поэтому для установки штифтов Вы можете использовать любую привычную Вам адгезивную методику и композитные цементы.
- ✓ Штифты полностью совместимы с имеющимися в продаже инструментами «IKADENT» и других производителей (Maillefer, MANI).
- ✓ Материал штифтов легко обрабатывается. Поэтому Вы можете при помощи алмазного инструмента скорректировать форму и длину штифта в зависи-

мости от клинического случая. Кроме того, в экстренном случае штифт легко удалить из канала при помощи алмазного бора или стального дреля.


**Эндоканальные штифты  
Модели А и В**

Эндоканальные штифты «IKADENT» применяются в качестве армирующего (усиливающего) элемента для эстетической реставрации частично разрушенной коронки зуба при эндодонтическом лечении. Эти штифты используются во всех группах зубов при сохранении минимум двух стенок естественной коронки. В силу отсутствия плеча (опорного элемента) штифты не предназначены для композитных реставраций при значительном повреждении или полной утрате естественной коронки, а также крепления на них металлокерамических коронок, мостов и прочих объемных конструкций.


**Модель А. Цилиндрическая форма**

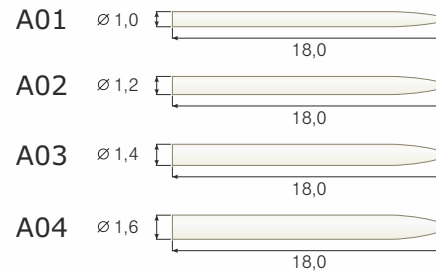

**Модель В. Цилиндро-коническая форма**

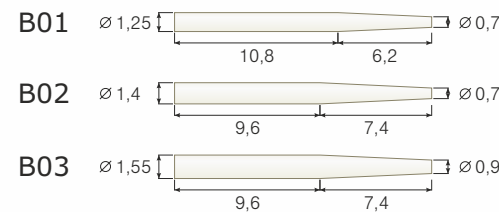


**Примеры использования:**

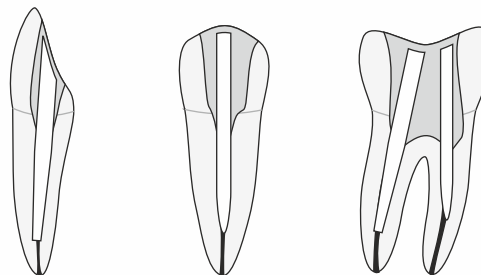


**Анкерные штифты  
Модель Е**

Анкерные штифты «IKADENT» используются для эстетической реставрации коронки зуба при ее значительном разрушении или полной утрате. Массивная коронковая часть облегчает создание культи, минимизируя массу композита, и обеспечивает максимальную площадь поверхности для надежной адгезии с реставрационным материалом. Наличие плеча (опорного элемента) позволяет применять штифты в качестве основы для объемных и высоконагруженных реставраций.

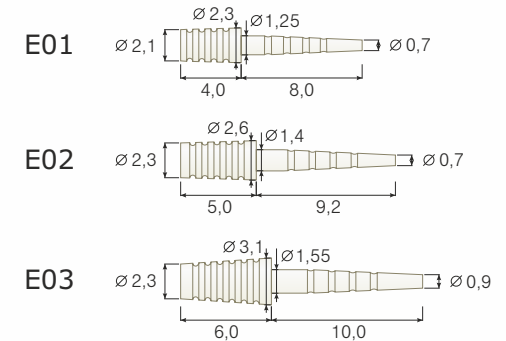

**Примеры использования:**

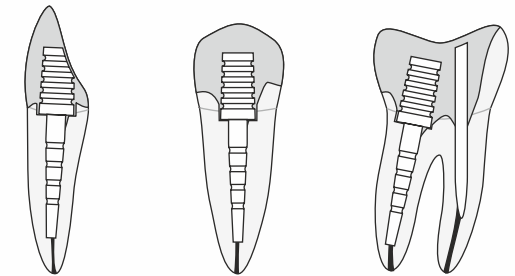

Штифты поставляются как отдельно (в блистерной упаковке), так и в составе наборов, содержащих инструменты для их установки. Рабочие размеры инструментов подобраны под установочные размеры штифтов, входящих в набор.

**Инструменты, входящие в набор, и их назначение:**

Развертка цилиндр (мод. А)	Расширение канала под размеры хвостовика штифта
Развертка конус (мод. В, Е)	
Торцевая фреза (мод. Е)	Создание плоского основания под плечо штифта